

## Fauteuil roulant électrique REHASHOP Tiger : Conversion pour une utilisation par les gauchers

Les étapes pour passer à une utilisation pour gauchers sont les suivantes :

1. À l'aide d'une clé hexagonale, desserrez

L'astuce consiste à retirer les vis qui fixent les accoudoirs, afin de pouvoir intervertir les accoudoirs gauche et droit.

(Fig. 1)




2. Retirez le guide-câble situé à l'arrière du fauteuil roulant. Ouvrez la fermeture du guide-câble.

(Fig. 2)



3. Repliez le fauteuil roulant de manière à pouvoir glisser le boîtier de commande entre l'assise et le dossier. Le faisceau de câbles se trouve à l'intérieur de l'accoudoir. (Fig. 3-5)

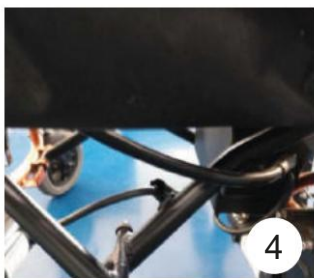

4. Fixez la commande en l'attachant à l'accoudoir gauche.

Vissez le guide-câble et fixez le câble de l'accoudoir. (Fig. 6)



Fauteuil roulant électrique REHASHOP Tiger :

Position de commutation du contrôleur

Veuillez suivre ces étapes pour changer la position du joystick de la droite vers la gauche :


1. Dévissez les mains courantes des deux côtés avec une barre hexagonale et inversez les mains courantes gauche et droite.  
(Fig. 1)



2. Retirez le fermoir de la rainure et Ouvrir le fermoir fixe.  
(Fig. 2)



3. Le fauteuil roulant est plié en deux pour faciliter le passage de la télécommande entre le coussin d'assise et le coussin de dossier, et le harnais de la télécommande se trouve dans le à l'intérieur de l'accoudoir. (Fig. 3-5)

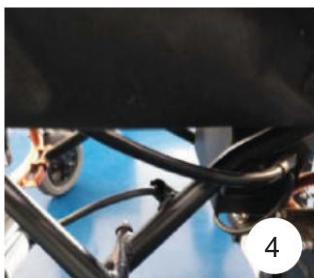

4. Le contrôleur est installé sur le côté gauche.  
support, fixation par vis et boucle filetée,  
et la boucle de fil est située dans le  
à l'intérieur de l'accoudoir. (Fig. 6)



## REHASHOP Fauteuil roulant électrique Tiger : Transformation pour gaucher

Vous pouvez maintenant utiliser les commandes suivantes pour convertir la chaise en mode gaucher.

1. Utilisez une clé hexagonale pour desserrer les vis qui fixent les accoudoirs afin d'inter-vertir les accoudoirs gauche et droits.

(Fig. 1)




2. Retirez le câble-guide jusqu'à la position du fauteuil. Ouvrez le volet du guide-câble.

(Fig. 2)



3. Répondez au fauteuil pour déplacer l'élément de commandement entre le siège et le dossier. Le faisceau de câbles doit être situé à l'intérieur de l'inclinaison.

(Fig. 3-5)

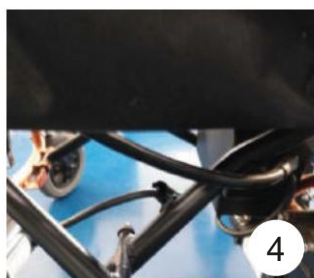

4. Sécurisez la boîte de commande en la vissant sur l'inclinaison gauche et en fixant le guide-câble sur l'inclinaison.

(Fig. 6)



## Fauteuil roulant électrique REHASHOP Tiger : adapté aux gauchers

Les étapes à suivre avant de s'adapter à une utilisation de la main gauche sont les suivantes :

1. Utilisez une clé Allen sur la vis

Los te maken waarmee de armleuningen zijn bevestigd, om de linker-met rechte-armsteun te verwisselen.

(Fig. 1)




2. Verwijder de kabelgeleider sur le bord arrière du rouleau. Ouvrez le connecteur du câble.

(Fig. 2)



3. Observez les graines du rolstoel depuis l'élément de commande du stoel et le rugleuning te duwen. La flèche du câble se trouve à l'intérieur de l'armleuning. (Fig. 3-5)

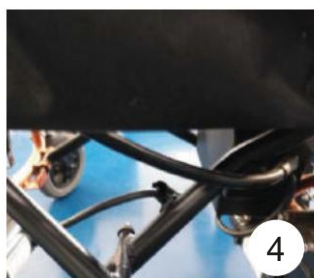

4. Fixez l'ourlet de la porte de l'élément de commande à gauche armsteun vaste te schroeven en  
Les connexions des câbles des bras sont sécurisées. (Fig. 6)

