



INVACARE SCOOTER

La mobilité peut être aussi belle.



Yes, you can.®

Faciles d'utilisation, silencieuses et écologiques, les trottinettes électriques sont un moyen de transport idéal et s'inscrivent parfaitement dans la tendance croissante de la mobilité électrique. Que ce soit pour faire les courses ou pour...
Une sortie au parc - avec les scooters Invacare
Façonnez votre vie de manière active, moderne et surtout mobile. Choisissez le véhicule électrique qui vous convient le mieux et gagnez en indépendance.



Aide à la décision et données techniques p. 4

Famille Invacare® Comet® p. 6

Comet® PRO



Comet® ULTRA



Famille Invacare® Orion® p. 9

Orion® PRO



Orion® METRO



Invacare® Leo® p. 13



Invacare® Colibri® p. 14



Caractéristiques, accessoires et couleurs p. 16

Conseils et astuces p. 24

Distance en km



AIDE À LA DÉCISION

Voici comment trouver le scooter qui vous convient le mieux :

	Invacare® Comet® PRO	Invacare® Comet®ULTRA	Invacare® Orion® PRO	Invacare® Orion® METRO	Invacare® Leo®	Invacare® Colibri®
Vitesse maximale, autonomie	10 1 / 15 km/h 55	10 km/h 49	10 km/h 52	6/10 1 km/h 43	6 / 8 1 km/h 34	6 km/h
maximale , poids du	km 136	km 148	km 136	km 110	km 83	16 km
véhicule (batteries incluses), largeur hors	kg 665 -	kg 665 -	kg 650	kg 660	kg 590	44-49 kg
tout, longueur,	685 mm 1450 mm	685 mm 1450 mm	mm 1320	mm 1270	mm 1220	505 mm
hauteur	100 mm	100 mm	mm 100 mm	mm	mm 60 mm	1010 mm
maximale des obstacles, poids maximal de				80 mm		45 mm
l'utilisateur, ¹ maximum	Jusqu'à 160 kg	Jusqu'à 220 kg	Jusqu'à 160 kg	Jusqu'à 136 kg	Jusqu'à 136 kg	Jusqu'à 136 kg
d'application						
Courtes distances, par exemple	-	-	-	•	•	•
Sorties shopping ;						
excursions plus longues, par exemple à la	•	•	•	-	-	-
campagne ; terrains difficiles	•	•	•	-	-	-
(surfaces irrégulières, pentes, etc.)						
Se démonte pour le transport	-	-	-	-	•	•

1 : Disponible uniquement en Suisse !
2 : L'autonomie maximale dépend du comportement de conduite réel et/ou du modèle.
3 : Zone de réglage des accoudoirs

INVACARE® COMET® – FAMILLE

Vivez une expérience de conduite haut de gamme en scooter, et surtout, amusez-vous beaucoup : profitez des performances exceptionnelles des **scooters de mobilité électrique** Invacare Comet, le tout dans un design moderne et élégant.

Le scooter Invacare Comet Pro est le choix idéal pour ceux qui privilégient style et performance. Avec une vitesse de pointe de 15 km/h, le Comet Pro **est** l'un des scooters Invacare les plus rapides.

La Comet Ultra offre une expérience de conduite sûre et performante, particulièrement adaptée aux personnes de grande taille et de forte corpulence, sans compromis sur le style ni la fonctionnalité. La Comet Ultra vous permet d'atteindre votre destination rapidement et dans un confort exceptionnel.

NOTRE CONSEIL : Montez à bord et prenez le volant !

Avec un scooter, on peut aller partout facilement. Pas besoin de permis de conduire, mais il faut avoir au moins 15 ans. Et c'est parti !



INVACARE® COMET® PRO

Puissance et performance pour les utilisateurs exigeants

Ils ont une sélection
un goût et un caractère distinctif
Un sens esthétique raffiné ?
Notre Comet Pro vous offre également
un confort de conduite luxueux.

Bénéficiez d'une sécurité maximale,
élégamment intégrée dans un boîtier
puissant et raffiné.
d'un modèle haut de gamme.



atteindre
KM*



Poids maximal de l'utilisateur
(kg)



vitesse
KM/H



*L'autonomie maximale dépend du comportement de conduite réel

INVACARE® COMET® ULTRA

Le scooter des durs à cuire

Ils ne font aucun compromis ? Tant mieux ! Notre Comet Ultra

Il offre suffisamment d'espace, de soutien et de sécurité aux cyclistes de grande taille .

Confort de conduite et fonctionnalité exceptionnels garantis. Quiconque fait confiance à ce véhicule puissant arrivera à destination confortablement et sans détour.



atteindre
KM*



Poids maximal de l'utilisateur
(kg)



vitesse
KM/H



INVACARE® ORION® – FAMILLE

Restez mobile et indépendant ! Avec un Invacare Orion

Accédez à tous les endroits rapidement et en toute sécurité, que ce soit pour une course rapide ou un long trajet en voiture.

Pour ceux qui en veulent plus

L' Orion Pro , au design ergonomique, est puissant et offre une grande autonomie. Vous apprécierez également sa maniabilité exceptionnelle, sa sécurité et sa fiabilité. Grâce à sa batterie haute capacité, sa suspension haut de gamme et ses grandes roues de 12 pouces, l' Orion Pro est idéal pour tous ceux qui recherchent des performances accrues. Rien ne vous empêchera de partir pour de longues virées en ville ou au parc.



*L'autonomie maximale dépend du comportement de conduite réel

Le partenaire idéal, pas seulement pour la vie de tous les jours

Le scooter Invacare Orion Metro a été conçu pour être agréable aussi bien pour les débutants que pour les utilisateurs expérimentés.

Il est particulièrement agile et se manie à merveille même sur les chemins étroits.

La sécurité est la norme

Tous les modèles Orion sont équipés d'un système d'éclairage puissant.

Un limiteur de vitesse électronique ralentit automatiquement le scooter dans les virages.

Cela vous permet de manœuvrer votre scooter en toute sécurité et confortablement dans toutes les situations. De plus, les scooters sont équipés d'un levier de déverrouillage à deux positions qui empêche tout déplacement involontaire. Ces caractéristiques, associées à des tests TÜV approfondis, garantissent le haut niveau de sécurité des scooters Invacare.

NOTRE CONSEIL : La conduite en scooter est à la mode !

Tout d'abord, ces véhicules électriques écologiques sont pratiques et peu coûteux à entretenir. Ensuite, leur design et leurs couleurs s'inspirent de l'industrie automobile, vous assurant ainsi d'être toujours à la pointe de la mode.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web : www.invacarescooter.com.



Fiable et puissant – idéal pour les aventuriers

Courses en ville, excursions au parc ?

Quiconque voyage fréquemment sur de longues distances tirera un réel avantage de l'Orion Pro. Son atout majeur...

Le modèle standard Orion Metro est doté d'un châssis confortable, de batteries puissantes et d'un siège haut de gamme – pour ceux qui en veulent plus !



atteindre
KM*



Poids maximal de l'utilisateur
(kg)



vitesse
KM/H



*L'autonomie maximale dépend du comportement de conduite réel

INVACARE® ORION® METRO

Soyez simplement mobile

Sortez de chez vous et allez faire une petite promenade .

Le métro Orion **est** toujours à votre disposition pour vos courts trajets, en toute sécurité et confort .

Services. L' Invacare Orion

Elle est si maniable qu'on peut facilement la conduire dans les rues étroites et les centres commerciaux.



43

atteindre
KM*

136

Poids maximal de l'utilisateur
(kg)

6/10

vitesse
KM/H

INVACARE® LEO®

Petit, compact, et pourtant géant.

Un compagnon idéal pour faire les courses : l' Invacare Leo impressionne aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Son rayon de braquage court et sa maniabilité fonctionnelle sont...

Ses points forts. Si vous le souhaitez, vous pouvez l'emporter en voiture : il se démonte facilement sans outils et se range dans presque n'importe quel coffre.



34

atteindre
KM*

136

Poids maximal de l'utilisateur
(kg)

6/8

vitesse
KM/Hoption de
transport public

Il répond parfaitement aux exigences pour être transporté dans les autobus de transport public.



*L'autonomie maximale dépend du comportement de conduite réel



*L'autonomie maximale dépend du comportement de conduite réel

Le marché aux puces de la ville

Emmenez-le avec vous !

Avec l' Invacare Colibri , **vous** pouvez aller partout où les voitures ne peuvent pas.

Se déplacer, même au supermarché.

Ce scooter est le plus petit et le plus léger des scooters Invacare.

Une trottinette qui peut être rapidement démontée sans outils et même dans

Les petites voitures peuvent être transportées. Le Colibri

Il vous permet également de vous

déplacer chez vous : il est si petit

et maniable qu'il peut facilement passer les portes des pièces.



atteindre
KM*



Poids maximal de l'utilisateur
(kg)



vitesse
KM/H



*L'autonomie maximale dépend du comportement de conduite réel

équipement véhicules électriques	Description	Invacare® Comet® PRO 15 km/h	Invacare® Comet®ULTRA 10 km/h	Invacare® Orion® PRO 10 km/h	Invacare® Orion® METRO 6 km/h	Invacare® Leo® 6 km/h	Invacare® Colibri® 6 km/h
Compartiment de rangement	pour les petits objets tels que les clés, les portefeuilles, les téléphones portables						
Automatique Réduction de vitesse	assure une conduite sûre dans les virages						
écran LED	Touches légèrement surélevées, signal sonore et confirmation visuelle par LED. Comprend un indicateur de niveau de batterie incliné, parfaitement visible même en plein soleil.						
écran LCD	Écran clair et lumineux affichant la vitesse, l'heure, la température, le kilométrage, les messages d'erreur, etc. Comprend un indicateur de niveau de batterie facilement visible.						
clignotant	Un bip indique que le clignotant est activé ; le clignotant s'éteint automatiquement après 30 secondes.						
feu de freinage	lumière vive et brillante avec effet de signalisation						
Phares doubles	Deux ampoules fournissent un éclairage extra vif.						
Transport facile	Démontable ou pliable sans outils						
suspension	pour un confort de conduite optimal (Suspension spéciale pour Comet®HD)						
grandes roues	pour un confort et une facilité de conduite optimaux Surmonter les obstacles						
frein à main	frein supplémentaire						
colonne de direction réglable	Réglable à l'infini pour un confort idéal et détendu Position assise (par étapes pour le Colibri®)						
réflecteurs	De nombreux réflecteurs assurent une protection passive Éclairage et sécurité						
Transport sécurisé	Œillets d'arrimage sur le châssis						
siège rembourré	avec rembourrage et sièges confortables						
Siège standard	avec appui-tête réglable et pivotant, ergonomique et confortable même lors de longs trajets						
Siège confort	avec appui-tête, marchepied et Réglage de l'angle du dossier sans outil, Support et guidage latéraux, réglables et rotatifs						
Siège Ultra	siège extra-large avec soutien extra-fort Le support de siège offre un espace suffisant et Support réglable et rotatif						
petites roues	pour une conduite contrôlée sur Bords de trottoir						
Découplage en deux étapes	Le système ne peut pas être désactivé accidentellement.						
Équipement de transport public (facultatif)	Frein de stationnement, homologation pour les transports publics, transports publics Étiquetage						

* L'équipement peut varier selon le pays.




Boîte de style MC
Coffre de rangement verrouillable pour objets de valeur à l'arrière, MC signifie Motorcycle et rappelle le coffre d'un scooter.



Grand panier de transport
Idéal pour vos courses : le panier spacieux est solidement fixé derrière le siège – parfait pour les sacs ou votre chien de compagnie.



Porte-canne
Où poser la canne ?
Il suffit de le placer dans le porte-canne et de partir.

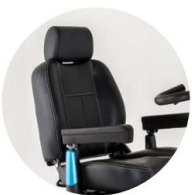

Siège confort
Le siège confort est équipé d'un recouvert d'un tissu noir résistant, aspect cuir.
Il est doté d'un réglage de l'angle de dossier progressif et sans outil.



Supports pour aides à la marche
Votre déambulateur peut également être emporté : il suffit de le plier, de l'accrocher au support et de le fixer avec la sangle.



Rehausse-siège électrique
Préférez-vous être assis plus haut ?
Actionnez le régulateur de hauteur de siège électrique à l'aide de l'interrupteur à bascule situé sur la colonne de direction pour lever et abaisser le siège.



Vue panoramique complète
Laissez tout derrière vous tout en gardant une vue d'ensemble : grâce à un rétroviseur supplémentaire, vous élargissez votre champ de vision vers l'arrière.



Pare-brise
Vous roulez à bonne allure ? Nous vous recommandons le pare-brise pratique pour vous protéger du vent.



support pour smartphone

N'oubliez pas d'emporter votre téléphone. L'endroit le plus sûr est cet étui, compatible avec la plupart des smartphones courants.



Sangle de retenue
avec bouton-pression

La sangle de sécurité réglable vous maintient en toute sécurité sur le scooter et s'ouvre facilement.



myBlanket housse de pluie

Protection optimale contre les intempéries.
Disponible en version été ou hiver.

Accessoires supplémentaires

- Grande poche de siège
- Hydrofuge et anti-salissures
housse de siège
- Plaque de marquage arrière conforme à l'article 4 du FZV (de série sur les modèles 10/15 km/h)



porte-gobelet pliable

Canettes, bouteilles, tasses à café – grâce au porte-gobelet sur la colonne de direction, votre boisson est toujours à portée de main.

S'il n'est pas nécessaire, il suffit de le plier.



Glissière de sécurité

En cas de choc accidentel malgré toute votre prudence, les pare-chocs robustes protégeront votre scooter des dommages – disponibles à l'avant et à l'arrière.

sélection des couleurs



Bleu ciel



Érable rouge



Argent



Garage pliant

Protège votre scooter stationné de la saleté et de la poussière.

NOTRE CONSEIL : Excellent
moyens de transport
Avec un scooter Invacare,
vous pouvez non seulement aller plus
loin, mais aussi transporter
beaucoup de choses !
Renseignez-vous auprès de
votre revendeur sur les
accessoires.



*Accessoires optionnels (selon le modèle) disponibles en supplément ; l'équipement peut varier selon les pays.

Accessoires	Description	Invacare® Comet® PRO 10/15 km/h	Invacare® Comet®ULTRA 10 km/h	Invacare® Orion® PRO 10 km/h	Invacare® Orion® METRO 6/10 km/h	Invacare® Leo® 6/8 km/h	Invacare® Colibri® 6 km/h
Chargeur de batterie	pour des temps de charge courts	•	•	•	•	•	•
Panier à provisions, devant	Panier robuste pour les petites courses	•	•	•	•	•	•
Panier à provisions, arrière	Grand panier métallique robuste pour transporter des objets volumineux						
Coffre à objets de valeur verrouillable à l'arrière	garde les choses au sec et en sécurité						
poche de siège	avec un couvercle pour ranger les petits objets						
Miroir, gauche	pour la sécurité routière	•	•	•	•	•	
Miroir, à droite	pour la sécurité routière	•	•	•			
Porte-canne	pour transporter des cannes ou des béquilles				•		
Support pour déambulateur/ déambulateur	pour fixer un déambulateur ou un rollator, y compris un porte-canne						
porte-gobelet	le porte-boisson pratique						
sangle de retenue	pour un positionnement optimal sur le siège						
Pare-brise	protège efficacement contre le vent et la saleté						
support pour smartphone							
Garage pliant	protège le scooter de la saleté et de la poussière						
Housse de siège	protège le siège de l'humidité et de la saleté						
Rehausse-siège électrique	pour un réglage facile et rapide du Hauteur du siège sans outils						
suspension de siège	pour une conduite encore plus douce sur les routes accidentées		*			• /	
Couleurs / Couvertures							
Argent						•	
Bleu saphir							•
Gamme de couleurs	Rouge érable, argent, bleu ciel	•	•	•	•		•

• = standard = optionnel * = poids maximal de l'utilisateur : 160 kg

Les couleurs et les modèles peuvent varier selon le pays.

Voici comment faire du scooter peut être amusant – en toute sécurité

1. Où les véhicules électriques sont-ils autorisés à circuler ?



Partout où des piétons sont présents, c'est-à-dire dans les zones piétonnes, sur les trottoirs, dans les parcs, dans les galeries marchandes, etc.

La vitesse de marche est obligatoire.

Bien sûr, vous pouvez

Des véhicules électriques également en circulation

La pratique du vélo est autorisée. Le port du casque n'est pas obligatoire.

2. L'assurance est-elle nécessaire ?



En Allemagne, les scooters dont la vitesse maximale est de 6 km/h n'ont pas besoin d'être assurés.

Ils seront couverts. Ils le sont généralement par votre assurance responsabilité civile habituelle.

Véhicules électriques avec un

Les véhicules dont la vitesse dépasse 6 km/h doivent être assurés. Pour cela, vous aurez besoin d'une plaque d'assurance spécifique (semblable à celle d'un cyclomoteur), que vous pouvez obtenir auprès de votre compagnie d'assurance. Vous pouvez également vous renseigner auprès de votre concessionnaire. 6. Les scooters sont-ils pris en charge par l'assurance maladie ?

3. Où puis-je garer mon scooter ?



Partout où l'on gare des vélos. Pour un stationnement prolongé, il est préférable de le ranger à l'abri et dans un endroit sec.

4. Le scooter a-t-il besoin d'un garage ?



Si vous avez un garage, votre scooter sera évidemment ravi.

à ce sujet. Mais il peut aussi dans

Il est conseillé de les laisser à l'extérieur.

Idéalement, il faudrait les protéger avec une housse de pluie, que vous trouverez dans notre gamme d'accessoires.

5. Un essai routier est-il conseillé ?



Tout comme pour une voiture, vous devez faire attention à

N'hésitez pas à faire un essai routier d'un véhicule électrique.

l'expérience au sens le plus pur

Le mot lui-même en dit long sur la facilité et la praticité des déplacements en scooter. Le mieux est de faire un essai.

chez votre fournisseur local de matériel médical.

Vous pouvez également trouver le concessionnaire le plus proche à

Notre recherche de revendeurs sur :

www.invacare.de



Les trottinettes peuvent généralement être utilisées à
Demande de la compagnie d'assurance maladie

sera remboursé ; ceci s'applique à

Modèles standard sans fonctionnalités spéciales
Équipement.

Ces modèles possèdent un numéro d'homologation de dispositif médical et sont en cours de traitement.

Les dispositifs médicaux sont répertoriés dans l'annuaire. Vous bénéficiez de notre longue expérience en tant que fabricant de dispositifs médicaux.

7. Important : Entretien des batteries du scooter



La manipulation soigneuse de
Les batteries des scooters augmentent la
Durée de vie explicitement indiquée. Charge
Vous devez remplacer les piles avant la toute première utilisation.
À utiliser pendant au moins 18 heures
Les batteries atteignent leur pleine capacité après 10
à 20 cycles de charge. Il est préférable de les
recharger tous les soirs, même si vous n'avez pas
beaucoup utilisé le scooter – idéalement pendant
12 heures.

Un style de conduite équilibré favorise une plus
grande autonomie !

Le mieux est d'essayer soi-même !

Vous vous sentirez non seulement à l'aise, mais aussi en sécurité sur un scooter Invacare dès le premier
instant – et vous profiterez de votre nouvelle liberté !

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et un voyage toujours sûr avec nos scooters Invacare !

SOUHAIT- SCOOTER DÉCOUVRIR

Scannez le code QR ou visitez
www.invacarescooter.com



NOTRE CONSEIL :

Conduire un scooter est amusant

Découvrez nos superbes scooters et
profitez de votre nouvelle indépendance !



www.invacarescooter.com

Invacare GmbH
À Achener Hof 8
88316 Isny,
Allemagne
Téléphone +49 7562 700-38
contact@invacare.com
www.invacare.de

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
5310 Mondsee,
Autriche
Téléphone +43 6232 553-50
Fax +43 6232 553-54
info-austria@invacare.com
www.invacare.at

Invacare AG
Neuhofweg 51
4147 Aesch BL
Suisse
Téléphone +41 61 48770-80
Fax +41 61 48770-81
switzerland@invacare.com
www.invacare.ch