



Invacare® | **Comet<sup>Pro</sup>, Comet<sup>Alpine+</sup>, Comet<sup>Ultra</sup>**

Kraft und Leistung im Premium-Paket



Wo immer Sie hin möchten, mit dem neuen **Comet<sup>Pro</sup>** sind Sie flexibel und unabhängig. Mit diesem Scooter flitzen Sie bequem und sicher mal eben in die Stadt oder machen einen Ausflug in die Natur.

Der neue **Comet<sup>Pro</sup>** ist gemacht für Outdoor-Aktivitäten. Dank seiner umfangreichen Sicherheitseigenschaften können Sie zügige und zuverlässige Fahrten genießen.

Erleben Sie Scooter-Fahren mit Premium-Charakter, und vor allem mit viel Spaß: Genießen Sie das außergewöhnliche, leistungsstarke Fahrverhalten des neuen **Comet<sup>Pro</sup>**, verpackt im schönen, modernen Design.



## Premium-Fahrerlebnis

Auch längere Fahrten über die Stadtgrenze sind mit dem **Comet<sup>Pro</sup>** kein Problem. Seine verbesserten Fahreigenschaften und die **leistungstärkeren Batterien** mit 2 x 75 Ah bringen Sie weiter. Mit der für den Außenbereich besonders gut geeigneten Bereifung in 13" und der **erstklassigen Federung** überwinden Sie mühelos Bordsteine und Hindernisse. Die **automatische Geschwindigkeitsreduzierung** verlangsamt den Scooter in Kurven. Das sorgt für noch mehr Stabilität und Sicherheit.

## Geprüfte Sicherheit

Wir setzen auf hohe Qualität: von den einzelnen Komponenten bis hin zu den durchdachten Sicherheitsfunktionen. Beispielsweise verhindert der **zweistufige Entriegelungshebel** ein Fortbewegen des Scooters, wenn er sich nicht im Fahrmodus befindet.

Der **Comet<sup>Pro</sup>** ist TÜV geprüft und entspricht den aktuellen Normen für Medizinprodukte.

## Kompaktes und modernes Design

Der **Comet<sup>Pro</sup>** wurde mit Fokus auf Komfort und Präzision entwickelt. Seine hohe **Manövrierfähigkeit** macht sich an engen und anspruchsvollen Stellen bezahlt. Der **ergonomische Lenker** sorgt für eine optimale Fahrposition, sodass Sie überall entspannt ankommen.





### Innovative Federung

Die verbesserte Federung des **Comet Pro** sorgt für mehr Leistung und ein sanftes Fahren auch auf anspruchsvollem Gelände.



### Auf geradem Weg

Die "Easy-Drive"-Funktion sorgt dafür, dass Sie bei hohen Geschwindigkeiten sicher und stabil geradeaus fahren.



### Den Lenker einstellen

Die komplette Lenksäule kann einfach verstellt und an die individuelle Körperhaltung angepasst werden.



### Ergonomische Lenkgriffe

Die Lenkgriffe wurden für eine natürliche und entspannte Handhaltung entwickelt. Auf Lenkbewegungen reagiert der Scooter sofort.



### Intuitives LCD-Display

Eine leicht verständliche Anzeige, mit der Sie alles im Blick haben, z.B. Geschwindigkeit und Batteriestatus.



### Bremslicht

Das klare und helle Bremslicht ist auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut sichtbar.



### Entriegelungshebel

Der zweistufige Entriegelungshebel verhindert, dass sich der Scooter selbständig in Bewegung setzt.



### Sicherheit in Kurven

Die automatische Geschwindigkeitsdrosselung verlangsamt den Scooter in Kurven.



### Gestalten Sie Ihren Scooter nach Ihren Wünschen

Sie haben die Auswahl aus 10 Farben und mehr als 25 optionalen Zubehörteilen. Einfach ausprobieren und Farbvarianten, Sitze und Zubehör kombinieren: mit dem Online Scooter-Konfigurator unter: [www.invacarescooter.com](http://www.invacarescooter.com).

Für alle, die hoch hinaus wollen! Das Modell **Comet Alpine+** empfiehlt sich besonders für Fahrten im anspruchsvolleren Gelände. Durch die robusten und leistungsstarken Fahreigenschaften können Sie Ausfahrten mit minimalem Aufwand und maximalem Komfort zuverlässig und sicher unternehmen.

Der **Comet Alpine+** gehört zur **Comet-**Familie und bietet dieselben Sicherheitsmerkmale und individuellen Anpassungsmöglichkeiten - mit etwas mehr Power.

- Leistungstark und robust
- Hervorragende Outdoor-Eigenschaften
- Sicher bis ins Detail



### Leistungstark und robust

Ab jetzt erklimmen Sie Anhöhen, ohne Aufwand. Der **kraftvolle Motor** des **Comet Alpine+** bringt Sie zuverlässig nach oben, und wieder nach unten. Besonders im Gelände kommt es auf Wendigkeit und Kontrolle an. Sie werden die exzellente Manövrierbarkeit und die **erstklassige Federung** dieses Modells zu schätzen wissen. Die **Easy-Drive Funktion** gewährleistet den Geradeauslauf auch bei hohen Geschwindigkeiten.

### Stark im Gelände

Der **Comet Alpine+** ist sehr robust. Regenschauer oder Straßenstaub können diesem Scooter nicht schaden. Sowohl die Elektronik als auch der Motor verfügen über einen zusätzlichen **Schutz gegen Spritzwasser und Korrosion**, um jegliche Fehlfunktionen zu vermeiden.

Die Verkleidung lässt sich sehr **leicht abnehmen**. Dadurch sind der Motor, die Batterien und die Elektronik sehr gut zugänglich.

## Ausstattung



### Sitzfederung

Noch mehr Komfort durch die optionale Sitzfederung.



### Elektrischer Sitzlifter

Mit dem elektrischen Sitzlifter können Sie den Sitz individuell in der Höhe anpassen. Die Bedienung erfolgt per Kippschalter an der Lenksäule.



### Extern aufladen

Mit dem externen Ladeadapter können Sie die Batterien ganz bequem in ausgebautem Zustand aufladen.

Der **Comet <sup>Ultra</sup>** bietet besonders großen Menschen ein sicheres, unterstützendes und leistungsstarkes Fahrerlebnis ohne Kompromisse an Stil oder Funktionalität. Als Teil der Modellreihe verfügt der **Comet <sup>Ultra</sup>** über sämtliche Funktionen und Fahreigenschaften des **Comet**. Der **Comet <sup>Ultra</sup>** bringt Sie schnell, effizient und mit höchstem Komfort an Ihr Ziel.



### Kraftvoll und zuverlässig

Aufgrund des sorgfältig durchdachten Planungsprozesses und der **stabilen Bauweise** müssen sich selbst Fahrer mit einem Gewicht von bis zu 220 kg über die Sicherheit und Stabilität des **Comet <sup>Ultra</sup>** absolut keine Sorgen machen. Der Comet Ultra ist Ihr zuverlässiger Begleiter. Bei der Entwicklung wurde auf **qualitativ hochwertige Komponenten** und zahlreiche **Sicherheitsmerkmale** höchsten Wert gelegt. Und damit er perfekt zu Ihnen passt können Sie diesen Scooter ganz nach Ihrem Stil gestalten.

### Komfort und Unterstützung

Der **speziell konturierte Sitz** des **Comet <sup>Ultra</sup>** wurde in Zusammenarbeit mit Therapeuten entwickelt. So ist eine optimale Sitzposition gewährleistet. Die **individuell aufblasbare Lordosenstütze** sorgt bei Bedarf für noch mehr Unterstützung im Bereich der Lendenwirbel. Die verstärkte Sitzaufnahme und die verstärkten Armlehnen bieten eine **exzellente Abstützung**, auch zum Ein- und Aussteigen.

## Ausstattung



### Verbesserte Federung

Die spezielle Federung sorgt für Sicherheit und Stabilität bei höheren Gewichtsbelastungen.



### Verstärkte Sitzsäule

Für zusätzliche Stabilität und Sicherheit beim Sitzen.



### Starke Armlehnen

Die Armlehnen können einfach an die individuelle Größe angepasst werden. Sie sind ideal zum Abstützen beim Ein- und Aussteigen.



### Rückspiegel

Mit einem zusätzlichen Rückspiegel erweitern Sie Ihr Sichtfeld nach hinten.



### Windschild

Gegen den Fahrtwind empfehlen wir das praktische Windschild.



### USB-Adapter

Perfekt zum Aufladen Ihres Handys oder Tablets - einfach einstecken und los geht's!



### Smartphone-Halter

Eine stabile und sichere Halterung, geeignet für die meisten gängigen Smartphones.



### Stockhalter

Bewahrt den Gehstock des Fahrers bei der Fahrt.



### Halter für Gehhilfen

So sind die Gehilfe oder der Rollator sicher dabei: einfach hinten am Scooter aufhängen und festziehen.



### Halter für Sauerstoffflaschen

Die Versorgung mit Sauerstoff ist auch beim Scooter-Fahren gewährleistet: Im eigenen Halter werden die Flaschen sicher mitgeführt.



### XL-Korb vorne

Der Extra-Stauraum am Scooter: Der XL-Korb ist dreimal größer als der Standardkorb.



### Comfort- oder Premium-Sitz

Die Scooter-Sitze sind mit einem **elegantem, strapazierfähigem Bezug** in schwarzer Lederoptik bezogen. Comfort- und Premium-Sitz verfügen über eine **stufen- und werkzeuglose Rückenwinkelverstellung**. Der Premium-Sitz ist durch seinen höheren und breiteren Rücken besonders für größere Fahrer geeignet. Seine **verstärkte Seitenführung** bietet noch mehr Stabilität beim Sitzen.



### Bereifungs-Varianten

Modern und sportlich kommt die neue **Niederquerschnittsbereifung** daher. Wählen Sie zwischen den schlanken, luftgefüllten 13-Zoll Reifen. Für die Extra-Portion Sicherheit kann der Scooter mit den neuen, **pannensicheren Reifen** ausgestattet werden. Diese bestehen aus Voll-Gummi, können keine Luft verlieren und sind besonders robust.



### Abschließbare Wertsachenbox

Hier bleiben die Wertsachen trocken und sicher verwahrt. Die abschließbare Box ist für vorne und hinten erhältlich.



### Elektrischer Sitzlifter

Mit dem elektrischen Sitzlifter kann die Sitzhöhe individuell angepasst werden. Die Bedienung erfolgt per Kippschalter an der Lenksäule.



### Großer Korb hinten

Der Korb ist sicher am Rückteil Ihres Scooters angebracht. Er ist ideal für den Transport von Einkaufstaschen.



### Faltbarer Getränkehalter

Dosen, Flaschen, Kaffeebecher - im Getränkehalter an der Lenksäule ist das Getränk stets in Griffweite. Wird er nicht gebraucht, einfach einklappen.



### Haltegurt mit Schnappverschluss

Der verstellbare Haltegurt hält Sie sicher auf dem Scooter und ist leicht zu öffnen.



### Stoßfänger

Die soliden Stoßfänger schützen Ihren Scooter vor Beschädigungen - für vorne und hinten erhältlich.

### Weitere Zubehöre und Optionen

- Große Sitztasche
- Externer Ladeadapter
- Wasser- und schmutzabweisender Sitzbezug
- Heckmarkierungstafel nach §4 FZV (Standard bei den 10/15 km/h Modellen)
- Reflektierende Sicherheitsweste
- Regenabdeckung
- 73,5 Ah Gel-Batterien
- 8 Ah Ladegerät

Weitere Informationen zum Scooter-Zubehör unter [www.invacarescooter.com](http://www.invacarescooter.com).

# Technische Daten

	Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe	Rückenlehnenhöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Gesamtgewicht (inkl. Batterien)
<b>Comet Pro</b>	510 mm	Comfort: 470 mm Premium: 460 mm	Min. 440 mm Max. 515 mm	Comfort: 490 mm Premium: 630 mm	665 mm - 685 mm	1450 mm	136 kg
<b>Comet Alpine+</b>	510 mm	Comfort: 470 mm Premium: 460 mm	Min. 440 mm Max. 515 mm	Comfort: 490 mm Premium: 630 mm	665 - 685 mm	1450 mm	143 kg
<b>Comet Ultra</b>	660 mm	535 mm	Min. 440 mm Max. 515 mm	515 mm	665 - 685 mm	1450 mm	148 kg

	Gesamtgewicht ohne Batterie	Max. Nutzer-gewicht	Batterie-kapazität	Wendekreis	Überwindbare Bordsteinhöhe	Unterboden-freiheit	Max. sichere Neigung
<b>Comet Pro</b>	ca. 63 kg	160 kg	2 x 12 V/75 Ah (C20) AGM	2750 mm	100 mm	100 mm	10° (17,6%)
<b>Comet Alpine+</b>	ca. 63 kg	160 kg	2 x 12 V/75 Ah (C20) AGM	2750 mm	100 mm	100 mm	10° (17,6%)
<b>Comet Ultra</b>	ca. 63 kg	220 kg	2 x 12 V/75 Ah (C20) AGM	2750 mm	100 mm	100 mm	10° (17,6%)


	Reichweite	Geschwindigkeit	Motorleistung
<b>Comet Pro</b>	55 km	15 km/h	550 W / 1600 W <sup>1</sup>
<b>Comet Alpine+</b>	58 km	10 km/h	650 W / 1800 W <sup>1</sup>
<b>Comet Ultra</b>	49 km	10 km/h	650 W / 1800 W <sup>1</sup>

1. Spitzenleistung


## Standardfarben



## Designfarben

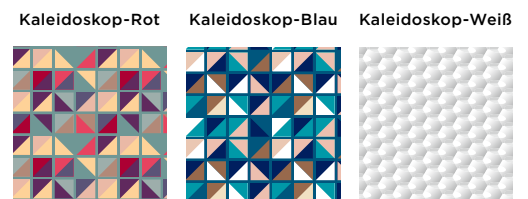

## Premiumfarben

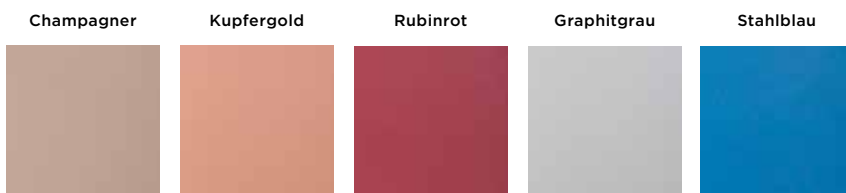

## Polsterung



**Invacare GmbH**  
 Alemannenstraße 10  
 88316 Isny  
 Deutschland  
 Telefon +49 7562 700-0  
 Fax +49 7562 700-66  
 E-Mail  
 kontakt@invacare.com  
 Web www.invacare.de

**Invacare Austria GmbH**  
 Herzog-Odilo-Straße 101  
 5310 Mondsee  
 Österreich  
 Telefon +43 6232 553-50  
 Fax +43 6232 553-54  
 E-Mail  
 info-austria@invacare.com  
 Web www.invacare.at

**Invacare AG**  
 Benkenstrasse 260  
 4108 Witterswil  
 Schweiz  
 Telefon +41 61 48770-80  
 Fax +41 61 48770-81  
 E-Mail  
 switzerland@invacare.com  
 Web www.invacare.ch



[www.invacarescooter.com](http://www.invacarescooter.com)



Yes, you can.®